



Электрический тренажер для рук и ног **Barry Spin (Барри Спин)**

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
2.2.1 Порядок сборки тренажера	4
2.2.2 Использование панели управления и пульта.....	5
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	7

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и принципа действия электрического велотренажера Barry Spin (Барри Спин). Перед использованием проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Компактный электротренажер для разработки верхних и нижних конечностей. Незаменим при проведении реабилитации для людей, перенесших инсульт; после травм спинного мозга; различных ортопедических нарушений; страдающих рассеянным склерозом; ДЦП; болезнью Паркинсона; после переломов конечностей.

1.2 Технические характеристики

Напряжение	24 Вольт
Мощность	80 Ватт
Масса брутто/нетто	5/4 кг
Стандартное время работы	30 мин
Максимальная нагрузка	40 кг Не оказывайте прямого давления на элементы тренажера!
Габариты упаковки	40x32x15 см

1.3 Упаковка

В коробке: тренажер, стабилизаторы (2 шт), педаль, пульт, противоскользящий коврик, зарядное устройство, гаечный ключ, отвертка-шестигранник, болты для крепежа (4 шт), руководство по эксплуатации.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Перед использованием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Обязательно следуйте всем указанным инструкциям.
- Перед использованием тренажера проверьте все кнопки.
- Проверяйте болты после каждого использования велотренажера.
- Металлические составляющие могут нагреться во время тренировок.
- Не вставайте на тренажер.
- Не используйте тренажер в игровых целях.
- Тренажер предназначен только для домашнего использования.
- Не храните тренажер во влажных местах.
- Для тренировки не надевайте слишком свободную одежду, а также украшения, так как они могут застрять в тренажере.
- Если вы почувствуете боль или головокружение во время тренировки, немедленно прекратите использование тренажера и обратитесь к специалисту.


2.2 Порядок работы

2.2.1 Порядок сборки тренажера

Сборка тренажера займет несколько минут.


1. Возьмите стабилизаторы (ножки тренажера) и закрепите их с помощью болтов, как указано на картинке. Используйте отвертку-шестигранник, чтобы надежно затянуть крепежные элементы.
2. Закрутите правую педаль (с отметкой “R”) в правостороннюю рукоятку, закрутите левую педаль (с отметкой “L”) в левостороннюю рукоятку.

Используйте гаечный ключ для сборки педалей. Правая педаль закручивается по часовой стрелке, левая педаль — против часовой стрелки.

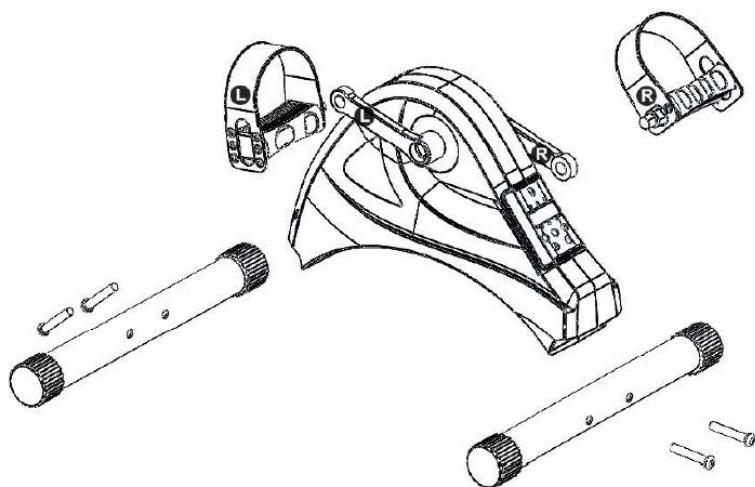

2.2.2 Использование панели управления и пульта

Дисплей:

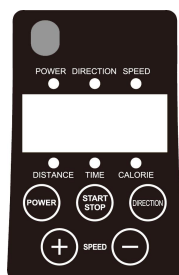

1. Цветовые индикаторы: POWER, DIRECTION, SPEED
DISTANCE, TIME, CALORIE.
2. POWER: Включение/выключение тренажера.
3. START/STOP: Старт/пауза работы тренажера.
4. DIRECTION: Смена направления движения педалей.
5. SPEED +/-: Регулировка скорости движения педалей
(только во время работы тренажера).

Использование тренажера Barry Spin (Барри Спин):

1. Подключите тренажер к электросети.
2. На экране загорится **00:00**, после нажмите на кнопку START, на экране загорится **-01-**, и тренажер заработает на уровне скорости
3. Используйте кнопку SPEED для регулировки уровня скорости от 1 до 6.
4. Нажмите на кнопку STOP чтобы остановить работу тренажера.

5. Стандартное время работы составляет 30 минут. По истечение этого времени тренажер автоматически выключится.
6. Нажмите на кнопку DIRECTION для смены направления движения педалей.
7. Во время работы тренажер будет последовательно демонстрировать показатели SPEED, DISTANCE, TIME, CALORIE.



3. Техническое обслуживание

Для работы пульта необходимы 2 батарейки типа AAA. Батарейки в комплект не входят.

Держите тренажер в сухом месте. Накройте изделие во избежание накопления пыли.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес сервисного и гарантийного центра, уполномоченного на ремонт и замену оборудования, указан на сайте sims2.ru.

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Электрический тренажер для рук и ног Barry Spin (Барри Спин)

Произведено: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),

8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C

Поставщик: ООО «СИМС-2» (Россия)

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90, (800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.
