

Костыли серии U, с принадлежностями:

Костыли подмышечные без устройства противоскольжения,
вариант исполнения: U Standart (размеры S, M, L).

Костыли подмышечные без устройства противоскольжения,
вариант исполнения: U Standart (размеры S, M, L)
с устройством против скольжения - Ice Trip



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.sims2.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Описание и работа	3
Использование по назначению.....	4
Техническое обслуживание	7
Условия гарантии.....	7

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик Костылей подмышечных U Standart. Перед использованием проверьте изделие на наличие повреждений.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Костыли предназначены для дополнительной опоры при ходьбе пользователей любого возраста.

Данное изделие можно использовать как в помещении, так и на улице.

Костыли позволяют исключить травмы ладоней (потёртости), уменьшить нагрузку на плечевой пояс, снизить энергозатраты при ходьбе. Равномерно распределённая нагрузка позволяет пациенту двигаться более продолжительные периоды времени. Изменение высоты позволяет регулировать костыли в соответствии с индивидуальным ростом пациента.


Костыли выдерживают нагрузку до 100 кг.

1.2 Технические характеристики

Модель	Высота от пола до подмышечного валика, см	Шаг регулировки рукоятки кисти, см	Шаг регулировки высоты костыля, см	Масса, кг	Материал	Наличие УПС
Костыли подмышечные без устройства противоскольжения, вариант исполнения: U Standart размеры S, M, L	100,5-120,5 110-130 130-150	4	2,5	1,45 1,55 1,65	алюминий	нет
Костыли подмышечные без устройства противоскольжения, вариант исполнения: U Standart размеры S, M, L с устройством противоскольжения - Ice Tip	103,5-123,5 113-133 133-153	4	2,5	1,5 1,6 1,7	алюминий	да

1.3 Упаковка

Комплектация: костыль подмышечный или 2 костыля в комплекте (пара), руководство по эксплуатации.

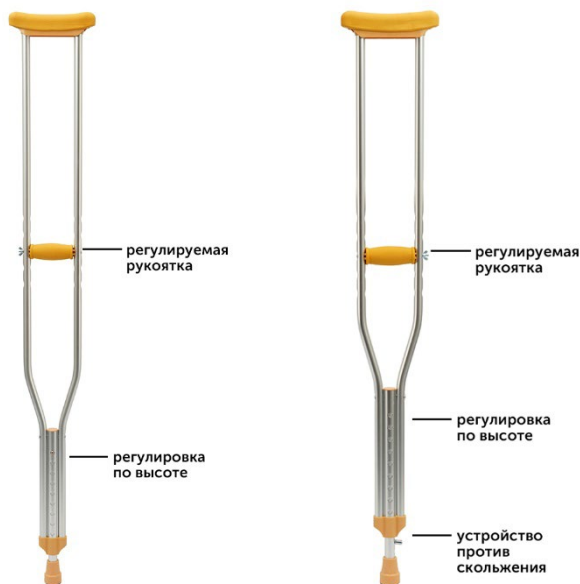

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Важные предупреждения

- Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела!
- Перед каждым использованием проверяйте костыли на наличие повреждений.
- Регулярно проверяйте насадки на наличие повреждений или износ.
- Механические изменения производить запрещено.
- Будьте внимательны во время передвижений по влажной плитке, полу или незакрепленному ковровому покрытию.
- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно, не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.
- Максимальная нагрузка: 100 кг.

2.2. Порядок работы

1. Костыли продаются в собранном виде.
2. При регулировании высоты костыля убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия.
3. Верхняя часть костылей должна упираться в подмышки на 2,5 – 4 см, когда вы стоите прямо.
4. Рукоятки костыля должны быть на уровне линии верхней части бедра. Рукоятки могут быть отрегулированы. Для этого необходимо отвинтить барашковую гайку. Затем вытащить винт полностью.
5. Переместите рукоятку на необходимую позицию, вставьте обратно винт и затяните барашковую гайку. Убедитесь, что барашковая гайка туго затянута.
6. Ваши локти должны быть немного согнуты, когда вы держитесь за рукоятки.
7. Прижимайте верхнюю часть костылей к бокам и используйте руки, чтобы переместить свой вес.
8. Верхняя часть костылей не должна сильно давить на подмышки.
9. Высота костылей может быть отрегулирована в соответствии с вашим ростом. Надавите на две кнопки одновременно и переместите трубку вверх или вниз.
10. Перед тем как использовать костыли, убедитесь, что кнопки полностью выскочили из отверстий.
11. При необходимости попросите сопровождающее лицо помочь вам.
12. Устройство против скольжения (УПС) встроено в нижнюю секцию стойки костыля и предназначено для повышения устойчивости при передвижении по скользкой поверхности. Перед первым использованием костыля после вскрытия упаковки необходимо подготовить УПС к работе:
 - Ослабьте фиксатор УПС.
 - Выдвиньте стержень УПС из нижней секции стойки костыля.
 - Отрегулируйте фиксатор таким образом, чтобы стержень УПС свободно перемещался при переводе устройства из рабочего положения в нерабочее и обратно, но при этом надежно удерживался в выбранном положении.

Рабочее положение УПС: стержень выдвинут вниз таким образом, чтобы его противоскользкий элемент выступал за пределы наконечника костыля и обеспечивал дополнительное сцепление со скользкой поверхностью.

Нерабочее положение УПС: стержень убран вверх и не выступает за пределы наконечника костыля.

Перед началом движения убедитесь, что УПС установлено в требуемое положение и надежно зафиксировано.

13. Эксплуатация:

- для того чтобы встать, возьмите в одну руку оба костыля;
- опираясь одной рукой на подлокотник сиденья, встаньте на здоровую ногу;
- возьмитесь обеими руками за костыли и разместите их в удобном положении.
- для того, чтобы ходить с помощью костылей держите локти слегка согнутыми;
- опирайтесь на костыли так, чтобы распределить весовую нагрузку на здоровую ногу;

- перемещайтесь пошагово на здоровой ноге;
- после того как почувствуете равновесие, повторите действия.

При перемещении вверх по ступенькам держите травмированную ногу сзади и не кладите ее на пол (рис. 1); поднимитесь на одну ступеньку с помощью здоровой ноги; расположите костыли на той же ступени, на которой находится здоровая нога (рис. 2).

РИС. 1


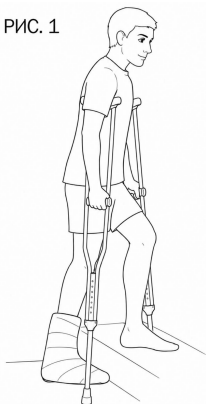


РИС. 2

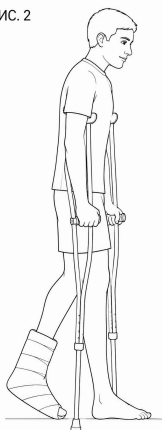

При перемещении вниз по ступенькам травмированная нога должна находиться спереди и не должна соприкасаться с полом; опустите костыли на одну ступеньку ниже и поставьте здоровую ногу на ту же ступеньку, на которой находятся костыли, как указано на рис. 3,4.

РИС. 3


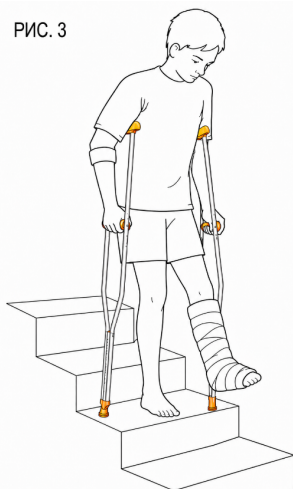


РИС. 4

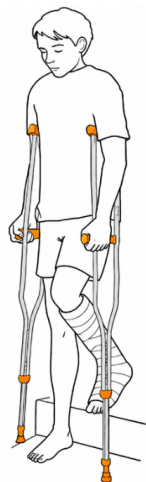

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждым использованием проверяйте костыли на предмет повреждений. Убедитесь, что кнопочные фиксаторы и насадки прочно закреплены. Замените насадки в случае необходимости. Для этого снимите насадку с конца трубки, прикрепите новую. Убедитесь в том, что насадка закреплена прочно.

ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы в насадке была металлическая пластинка. Она защищает насадку от прорыва трубкой костыля. Результатом этого может стать повреждение напольного покрытия или падение.

В целях безопасности используйте для замены только оригинальные запчасти.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на производственные дефекты при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Артикул № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Костыли серии U, с принадлежностями

Производитель: Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд, Китайская Народная Республика.

Место производства: ООО «АРИДЕС», Республика Армения, г. Ереван, 0064, Малатия - Себастья, ул. Раффи, 111

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «СИМС-2», г. Москва 125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Регистрационное удостоверение

ФСЗ 2011/10859 от 03.02.2026 г. (ЕРУЛ Г004-00110-00/02921382)